


# ST.REED PLUS™

Cateter de neurólise dirigível

Minimamente invasivo

Tempo de recuperação rápido

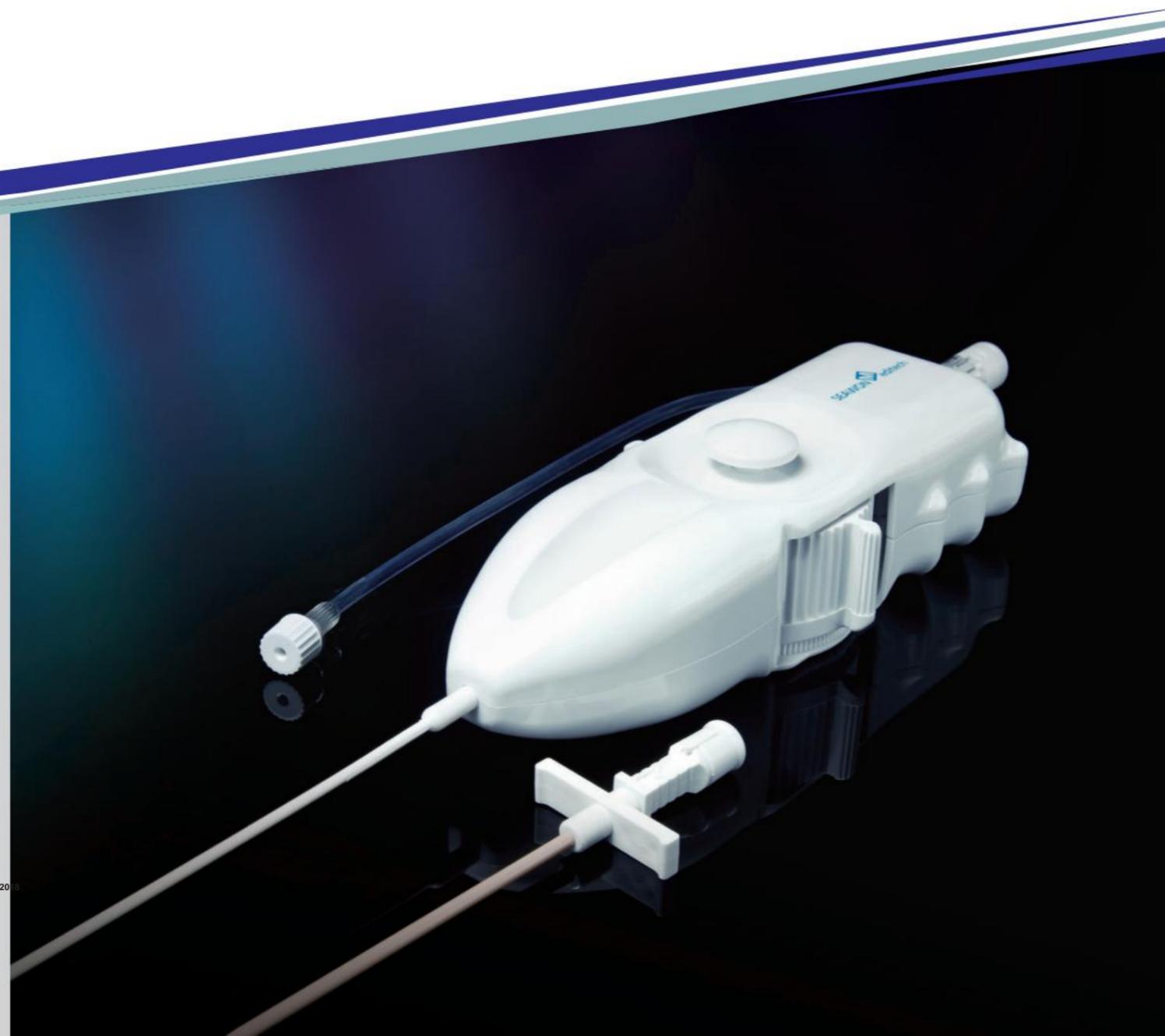

18/06/20

## St.Reed Plus (Sistema de cateter de neurólise orientável)

"Técnica de Cateter de Neurólise Direcionável", este método comprovado tem sido usado para descomprimir nervos espinhais sem cirurgia aberta e aliviar de forma duradoura a dor associada à coluna vertebral aguda e crônica distúrbios. St.Reed Plus, que é uma espécie de neurólise dirigível sistemas de técnica de cateter para o método comprovado acima mencionado tem o alavanca de controle para dirigir e, idealmente, mirar com precisão através do canal espinhal para tratamento preciso de patologia.



### Indicações

- Dor crônica nas costas
- Estenose espinal
- Síndrome Pós-Laminectomia
- Núcleo pulposo herniado

### Informações e especificações do modelo

Não	Modelo Nome	Cateter Nome do artigo	Agulha Artigo Nome	Fio guia Artigo Nome	Cateter Comprimento (milímetros)	Cateter fora Diâmetro (Ø)	Agulha Comprimento (milímetros)	Agulha Diâmetro (Ø)
1	COV33-2 SWV33N	SWVP-33R	SWGW-700-085	295	91,2	2.1	2.8	
2	COV33-3 SWV33M							
3	COV33-4 SWV33							
4	COV33N-S2 SWV33-3 SWVP-13P					1.7	2,34	

### Vantagens

- Terapia de baixo risco
- Minimamente invasivo
- Sem anestesia geral
- Altas taxas de sucesso
- Sem formação de cicatriz
- Sem cirurgia aberta
- Sem hospitalização prolongada
- Rápida Recuperação
- Repetível a qualquer momento
- Também ideal para pacientes que foram submetidos a cirurgias anteriores
- Tratamento direcionado das causas

### Contra-indicações

- Gravidez
- Infecção
- Doença metálica

### Características

- Execute bidirecionalmente
- Eixo radiopaco e aromático suave
- Ponta distal aromática direcionável
- Fácil de lidar
- Fácil de dirigir com precisão
- Não há necessidade de retirar o estilete para injetar a medicação

### Instruções de uso

- Preparação para Neuroplastia Percutânea Epidural eu. Posição Prone: Posicionar um paciente na mesa de operação
- O braço C é girado para a posição lateral para visualizar o hiato do paciente.
- Vista-se e coloque uma cortina ao redor do hiato.
- Injetar lidocaína para anestesiá-lo para anestesia local dentro do hiato.
- Perfure o hiato usando o introdutor/agulha/estilete.
- Retire a agulha e o estilete.
- Deixe o introdutor em hiato.
- Insira o cateter peridural até alcançar o espaço entre a dura-máter e o ligamento amarelo através do orifício.
- Verifique onde o cateter está com o braço em C.
- Injete o medicamento misturado no cateter através do orifício de injeção do corpo.

