

# Dispositivo para a Coluna Cervical - JAZZ LOCK

Registro Anvisa nº 81207910059



## Características

O **JAZZ LOCK** é um dispositivo implantável indicado para cirurgias da coluna vertebral, onde promove a estabilização durante o desenvolvimento da fusão óssea e na consolidação de fraturas. O implante possui baixo perfil e faz parte de uma tecnologia que dispensa a utilização da haste.


## Componentes do dispositivo:

**Base Lock:** Base metálica em liga de Titânio (Ti6Al4V), de tamanho único.

**Lock Insert:** Dispositivo em peek desenvolvido para ser acomodado no interior da Base Lock. Tem como finalidade a compressão da banda e as ranhuras laterais impedem a perda da tensão do sistema após completamente tensionado.

**Banda:** Material em poliéster (polietileno tereftalato) de alta resistência, promove maior área de contato entre a banda e o osso e permite a distribuição das forças o que minimiza o risco de fratura laminar.


Com a largura de 4 mm e espessura <0,5 mm, possui guia maleável em aço inoxidável (não implantável) para facilitar a passagem sob a estrutura óssea.

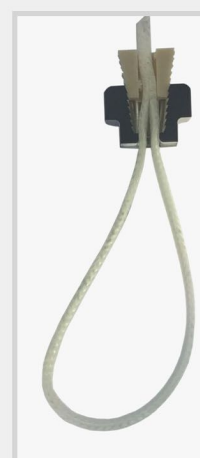

## Benefícios:

- 1 Conector de baixo perfil.
- 2 Sistema de fixação posterior sem haste.
- 3 Tensionamento eficiente e confiável.
- 4 Adapta-se à todos os níveis da coluna vertebral.
- 5 Grande área de contato entre o implante e a superfície óssea
- 6 Pode ser associado à cirurgia híbrida.
- 7 Maior conforto ao paciente.
- 8 Melhor visualização do exame de imagens no pós-operatório.
- 9 Tamanho único para toda a coluna.
- 10 Fácil de usar.

## ILUSTRAÇÃO DO SISTEMA JAZZ LOCK

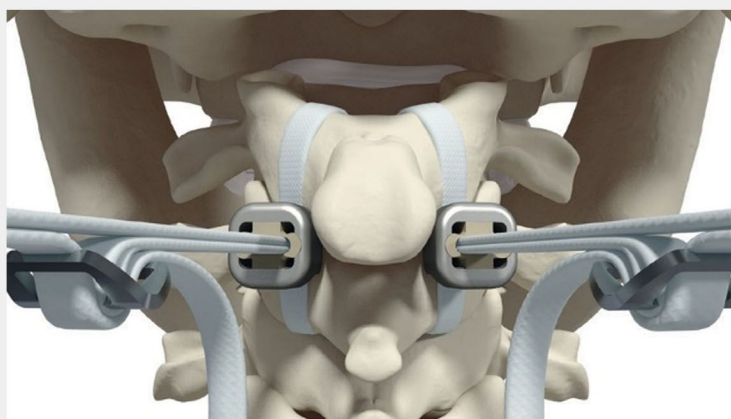

## Indicações:

- Cirurgia da Coluna Cervical - Subluxação atlanto axial (ou luxação), fratura de odontóide, traumas e artrite reumatóide.
- Cirurgia degenerativa, complemento à fusão vertebral, como discopatia degenerativa, estenose ou espondilolistese.
- Cirurgia traumática da coluna vertebral, uso sublaminar, interespinhoso e em técnicas de conexão facetária.



+55 11 2629-4344

+55 11 97483-4390

vendas@importek.com.br

Rua Niterói, 362 - Sala 17 - Centro - São Caetano do Sul/SP

importek

importek.com.br